

ביצוע בדיקות גנטיות - sema4 - דף הנחיות

רצוי לבצע את הבדיקה על הבוקר.



אסור לעשן, לשתות, לאכול, להתנשק, לצחצח שיניים או ללעוס מסטיק 30 דק' לפחות לפני.

לפני הבדיקה צרו חיכוך עם הלשון בלחיים הפנימיות, אפילו שימו כמה גרגרי סוכר על הלשון כדי לעודד יצירת רוק.

בצד הפנימי של הקופסא יש מדבקה עליה תרשמו בטוש לא מחיק את שמכם, תאריך הלידה ותאריך ביצוע הבדיקה (מילוי המבחנה).



מדבקה אחת מתוכן הדביקו על המבחנה שלכם, ואת השנייה השאירו בתוך הקופסא.


המבחנות יישלחו אל הכתובת אותה נתתם למרפאה בתוך מספר ימים - ע"י שליח.




כל מטופל יקבל ערכה, שבתוכה מבחנה, מעטפה והסברים.




נערו את המבחנה.

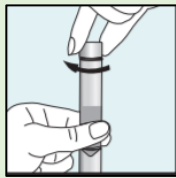


סגרו היטב את המבחנה באמצעות הפקק הקטן.

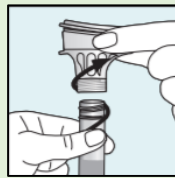

הסירו את המכסה הגדול מהמבחנה.

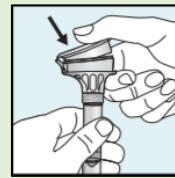

יש לסגור את המכסה עד שישמע "קליק" ותראו את הנוזל מתוך המכסה, נוזל אל תוך המבחנה.

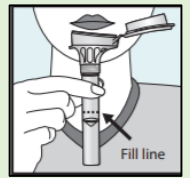

יש לירוק אל תוך פיית המבחנה עד שקו הרוק יגיע מעט מעל לקו המסומן (ללא בועות)



יש לצלצל אל פדקס (1700700339) ולהזמין משלוח לאיסוף. המעטפה שולמה מראש ולכן אין צורך.

אם תשאלו, הדגימה אינה מדבקת.

תשאלו על ידי הנציג מה מספר המעקב בן 12 ספרות, ציינו את המספר הזה.

אם תשאלו מי הגורם המשלם, תצינו Mercury Business Services.

את החבילה יש לשמור בטמ' החדר עד לשליחה, ולמסורה לשליח שיגיע לקחת.



את המבחנה יש להחזיר לקופסא השקופה ואל תוך הערכה.

את הטפסים שמילאתם והערכה הכניסו אל תוך השקית הכתומה של פדקס.



בתוך המעטפה של פדקס, בנוסף לערכה - נמצאת המעטפה החוזרת (מעטפת פדקס כתומה), אשר אליה מוצמדת מעטפת ניילון ובה דפים למשלוח החוזר. הוציאו את הדפים, חיתמו על 3 עמודי ה-Invoice שמצורפים שם, והחזירו לשקית כשכתובת המשלוח והברקוד (12 ספרות) מוצג.



לאחר שהשליח אוסף את הדגימה יש לעדכן את הצוות של המרפאה. בתוך כשבוע תקבלו מייל מ-4SEMA שהבדיקה הגיעה, והנחיות לפתיחת משתמש באתר שלהם.

לאחר כשבועיים נוספים תקבלו מייל שיש תוצאות. בשלב זה צרו קשר עם הצוות הישראלי להנחיות ותיאום מועד לייעוץ על התוצאות.



תוצאות מתקבלות תוך כשבועיים-שלושה שבועות. כשיגיעו התוצאות, יצרו איתכם קשר לתיאום שיחה טלפונית עם חברת Sema4 והיועץ הגנטי שלה כדי לעבור על התוצאות שלכם וההשלכות.

בהצלחה! אנחנו כמובן פה לכל שאלה שתעלה בדרך...